



شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

خبرنامه تعاونی دندانپزشکان ایران - دی ۱۴۰۲

 [idc_1359](#)

 [idc1359](#)

 www.idc1359.ir



آلزینات یکی از متداول‌ترین مواد مورد استفاده برای گرفتن قالب از دهان است.

برای انتخاب و خرید لازم است اطمینان حاصل کنید که آلزینات دارای کیفیت بالا و مورد تأیید استانداردهای دندانپزشکی باشد، چرا که کیفیت پایین می‌تواند بر دقت قالب‌گیری تأثیر بگذارد.

آلزینات‌های سریع‌گیر برای موقعیت‌هایی که نیاز به سرعت دارید و آلزینات‌های با زمان گیرش طولانی‌تر برای کارهای دقیق‌تر مناسب‌تر هستند.

انتخاب ماده‌ای که انعطاف‌پذیر باشد و استحکام کافی داشته باشد برای جلوگیری از شکستن یا ترک خوردن قالب مهم است.

به علاوه همواره تاریخ انقضاء محصول را بررسی کنید. آلزینات باید در دمای اتاق، دور از رطوبت و نور خورشید نگهداری شود.

مطمئن شوید که بسته‌بندی آلزینات به خوبی بسته شده و در برابر هوا مقاوم است

شانزدهمین دوره‌ی ثبت نام بیمه درمان تکمیلی
با بالاترین پوشش آغاز گردید ... کلیک کنید

۰۲۱- ۸۸۲۸۵۷۲۵ ۰۹۱۲۹۲۲۶۹۴۸
۰۲۱- ۸۸۲۳۰۵۰۹ ۰۲۱- ۸۸۲۳۰۵۰۸

telegram : @bimepasargad2465

بیمه درمان تکمیلی تعاونی دندانپزشکان ایران با بیش از ۱۵ سال قدمت همچنان در عرصه خدمات‌دهی به دندانپزشکان پیشتاز است. شانزدهمین دوره خدمات بیمه‌ای درمان تکمیلی با پوشش گسترده و حداقل حق بیمه در این تعاونی در حال ثبت نام است.

برای اطلاعات بیشتر بارکد
را اسکن کنید



polydentia
swiss manufacture

محصولات پلی دنشیا
موجود شد

www.idc1359.ir



وسایل مخصوص ارتودنسی


T.S.H

بررسی موقعیت صحیح بیمار و دندانپزشک



بسیار راحت است که در حالت خمیده قرار بگیرید و به سمت بیمار خم شوید، اما این کار باعث ایجاد مشکل در ستون فقرات می‌شود. هنگام کار حتماً کمر را صاف، شکم را به سمت داخل و شانه‌ها را عقب نگه دارید.

● این موقعیت، دسترسی به سطوح دندان ترسیم شده را فراهم می‌کند.

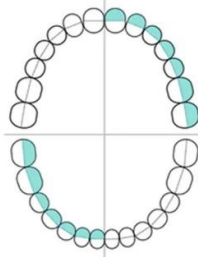


www.idc1359.ir



اگرچه دستورالعمل‌هایی برای موقعیت پزشک و بیمار برای دسترسی و درمان نواحی خاصی از دهان وجود دارند، اما توجه به این نکته مهم است که هر پزشک می‌تواند یک موقعیت مناسب اختصاصی را برای خود ایجاد کند.

● این موقعیت، دسترسی به سطوح دندان ترسیم شده را فراهم می‌کند.

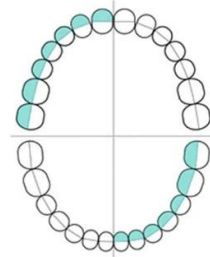


www.idc1359.ir




حداکثر دید، پیش نیاز موفقیت درمانهای دندانپزشکی است. دید در دندانپزشکی شامل روشنایی و بزرگمایی میدان کار می‌شود. لازم است که دندانپزشک نیز حتماً در پوزیشن مناسبی باشد.

● این موقعیت، دسترسی به سطوح دندان ترسیم شده را فراهم می‌کند.

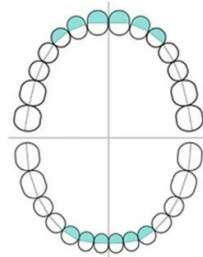

www.idc1359.ir

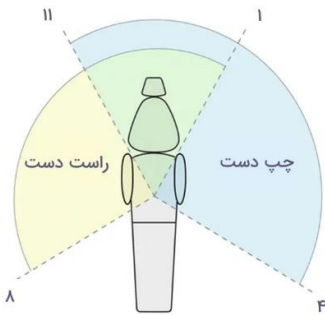

معمولاً محدوده موقعیت‌های پزشک با اشاره به موقعیت صفحه ساعت نشان داده می‌شود. برای یک پزشک راست دست، موقعیت‌های کاری باید بین A و ۱ باشد، درحالی‌که پزشکان چپ دست در محدوده ۱۱ تا ۴ فعالیت می‌کنند.

www.idc1359.ir

چند نکته در مورد آمالگاماتور

قبل از استفاده از آلیاژهای دندانی، مانند آمالگام ها یا سیمان، لازم است با استفاده از ترکیبات از پیش تعیین شده با نسبت خاصی مخلوط شوند. آمالگاماتور دندانی، برای ترکیب مواد ترمیمی مانند کپسول آمالگام نقره و گلاس آینومرها استفاده می‌شود. این دستگاه از دو مخزن جداگانه که هر کدام برای ریختن مواد و پودر آمالگام و مخزن دیگر برای ریختن جیوه جاسازی شده، تشکیل شده است.

دستگاه آمالگاماتور از چه اجزایی تشکیل شده است؟

مخزن اصلی - موتور الکتریکی - محفظه مخلوط کن - پیچ تنظیم کننده دستگاه
گیره نگهدارنده - میکروسوئیچ ایمنی دستگاه - درپوش محافظت کننده
تایمر به صورت دیجیتال و یا آنالوگ

عوامل موثر بر طول عمر دستگاه آمالگاماتور چیست؟

تمیز کردن داخل دستگاه با استفاده از پرس مخصوص
قرار ندادن دستگاه آمالگاماتور در معرض مستقیم نور خورشید
برعکس کردن دستگاه، هر هفته دوبار برای خارج کردن مواد باقیمانده و خشک شدن پس از شستشو
در زمان چرخش دستگاه، نباید ادامه چرخش را با دست نگه داشت و باید منتظر ماند تا دستگاه خودبخود بایستد تا فشار به موتور دستگاه نیاید.

برندهای معتبر مواد دندانپزشکی

(فروش به صورت حضوری و از طریق سایت)

ارسال رایگان

تهران برای مبالغ بالای ۱۲ میلیون تومان
و سایر شهرها برای مبالغ بالاتر از ۱۶ میلیون تومان



دارای صفحه نمایش دیجیتالی
ساخت ایتالیا
جنس بدنه ABS
مجهز به میکروپروسسوری
نگهداری ۱۰ برنامه در حافظه
قابلیت زمان بندی

آمالگاماتور

www.idc1359.ir



برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت دوم تعاونی دندانپزشکان ایران

مجمع عمومی سالانه نوبت دوم تعاونی دندانپزشکان ایران، با حضور جمعی از اعضای برجسته و پیشکسوتان، در روز پنج شنبه، ۲۱ دی ماه برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی چون بررسی روند و تحولات شرکت و همین طور انتخاب بازرس مورد گفتگو قرار گرفت. سرکار خانم دکتر میرزمانی، با تاکید بر تامین محصولات از تامین کنندگان اصلی و همین طور حفظ اصالت و ارائه قیمت منصفانه، تعاونی دندانپزشکان ایران را به عنوان مجموعه ای قانون مدار و شناخته شده از سمت دندانپزشکان، پایبند به ضوابط اعلامی از سمت سازمان مالیاتی کشور دانست.

در این جلسه اعضا به بررسی فعالیت ها و حضور تعاونی دندانپزشکان در کنگره ها، نمایشگاه ها پرداخته و هم چنین بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.



شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

www.idc1359.ir

 idc_1359

 idc1359

تهران، کوی نصر، خیابان شهید علیالی (پیروزی) غربی، شماره ۹۴ 

۰۲۱-۸۸۲۶۸۳۰۴

۰۲۱ - ۸۸۲۶۸۳۰۵

۰۲۱- ۸۸۲۶۸۳۰۹